

VX 40 Pro

Certifica la perfezione
dei tuoi occhiali



Semplifica il tuo controllo finale e aumenta il tuo potenziale

Il VX 40 Pro è un analizzatore di montaggio finale (lenti + montatura) progettato per soddisfare le crescenti esigenze di precisione, qualità e conformità nei negozi di ottica. Grazie alla sua tecnologia avanzata e all'interfaccia intuitiva, diventa uno strumento essenziale per l'ottico moderno. Ottimizzato sia per i montaggi in negozio che per quelli tramite telesagomatura, il controllo diventa piacevole, rapido e intuitivo.



SEMPLICE E VELOCE

Dotato di un'interfaccia semplice e fluida, accessibile a tutti i membri del tuo team, il VX 40 Pro è progettato per integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro. I risultati appaiono in pochi clic, senza procedure complesse.




PRECISO


Verifica istantaneamente la conformità degli occhiali finiti. Il nostro dispositivo ispeziona con precisione gli occhiali montati (lenti + montatura). Con la tecnologia WaveFront, controllate il design delle lenti progressive montate nel vostro laboratorio o quelle dei vostri nuovi clienti.



Rilevamento automatico delle lenti

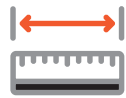

Ampio intervallo di misurazione

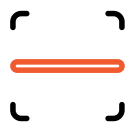

Mappatura delle lenti



Visualizzazione del centro ottico e delle microincisioni



CONTROLLO QUALITÀ

Il dispositivo controlla ogni aspetto dell'occhiale: sfero, cilindro, asse, prismi e posizionamento dei centri ottici, permettendo di rilevare eventuali errori o deviazioni.

Queste misurazioni vengono salvate in un report che garantisce la conformità dell'occhiale consegnato al cliente.

Accedi a tutti i tuoi report di controllo e visualizza i tuoi montaggi, in scala 1:1, direttamente sullo schermo. Tutte queste funzionalità ti aiuteranno a soddisfare le tue aspettative e quelle dei tuoi clienti.

visionix

CERTIFICAZIONE MONTAGGIO

Nome paziente	# Job	Data
James Richard	ZE	19/08/2025

Tipologia di lente		Progressiva
Occhio Destro	Occhio Sinistro	
1.75 (0.75) 110° ADD 2.00	1.25 (0.50) 70° ADD 2.00	
1/2 PD 30 H 25	1/2 PD 32 H 25	

L'occhiale è conforme alle misurazioni effettuate dal tuo ottico e alla tua prescrizione. I tuoi occhiali sono stati controllati da AP.

(1) Sfero: Potere per correggere la miopia (segno -) o l'ipermetropia (segno +)
Cilindro e Asse: Valore dell'astigmatismo (potere e direzione dell'asse)
Addizione (ADD): Potere aggiunto alla prescrizione da lontano per la visione da vicino (per la presbiopia)
(2) Prisma (Δ): complemento alla correzione sferica o cilindrica
Eccentricità pupillare (°PD): distanza tra il centro della pupilla e il centro del setto nasale
Altezza (H): distanza tra la pupilla e il bordo inferiore della montatura

visionix

Specifiche Tecniche

DIMENSIONI:

LARGHEZZA	240 mm
PROFONDITÀ	370 mm
ALTEZZA	480 mm
PESO	11.3 Kg

Intervalli di Misurazione

Potere sferico	-15-+10 D (passi 0.01, 0.06, 0.125, 0.25 D)
Potere cilindrico	0-+/-10 D (passi 0.01, 0.06, 0.125, 0.25 D)
Asse	0-180° (passi 1°)
Addizione	0-3.5 D (passi 0.01, 0.06, 0.125, 0.25 D)
Prisma	0-+/-10 Δ (passi 0.01 Δ)
Distanza interpupillare	Monoculare e binoculare
Altezza	Monoculare



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

VISIONIX ITALIA SRL

Via dei Pioppi 18 - 20024 Garbagnate M.se - Mi-
Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243
contact-it@visionix.com

www.visionix.com